


流量調整器一体型バルブ



# SPフロー

着脱不要で  
使いやすく安全

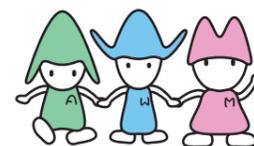

Point 1

ボンベ交換の  
安全性を追求

Point 2

最小流量  
0.25L/分に  
対応

Point 3

見やすい文字盤  
夜光で停電時も  
目視可能



エアウォーター・メディカル株式会社

- ◆患者さまご自身による流量調整器の取り付け・取り外し作業は一切ありません。いつでも簡単・安全に酸素を吸入できます。
- ◆酸素節約装置「SPセーブ」と併用することで、コンパクトに収納可能です。



| 製品仕様               |                                     | 医療機器対象外<br>(容器バルブ、その他)                  | 容器バルブ    | 安全弁付き<br>脚ネジ: 3/4-16UNF<br>充填口: 酸素ヨークピン式 |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------|--|
| 品名                 | SPフロー                               |   |          |  |
| コード番号              | ZS-IAB101                           |   |          |  |
| 医療機器部<br>(酸素流量調整器) | 製造販売届出番号                            | 11B1X00004000001                        | 酸素出口ノズル  | ワンタッチジョイント方式                             |
|                    | 一般名称/分類                             | 高圧ガスレギュレータ/一般医療機器                       | 圧力インジケータ | 30MPa (F.S)                              |
|                    | 特定保守管理医療機器                          | 該当                                      | 保護カバー    | 一般合成樹脂製                                  |
|                    | 使用ガス                                | 酸素                                      |          |  |
|                    | 使用温度                                | 0℃~40℃                                  |          |  |
|                    | 入口圧力                                | 5~19.6MPa                               |          |  |
|                    | 出口圧力                                | 0.13MPa (±20%)                          |          |  |
|                    | 設定流量 (L/分)                          | 0/0.25/0.5/0.75/1/1.5/<br>2/2.5/3/4/5/6 |          |  |
| 流量精度               | 1.0L/分未満: ±0.1L/分<br>1.0L/分以上: ±10% |   |          |  |

■ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

### 酸素節約装置

# SPセーブ

吸気時のみ酸素を供給し、ボンベが長く使える。

小型/軽量

最大流量  
6L/分に対応

電池不要

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 品名         | SPセーブ              |
| コード番号      | ZS-IAB201          |
| 医療機器認証番号   | 22600BZX00385000   |
| 一般名称/分類    | 呼吸同調式レギュレータ/管理医療機器 |
| 特定保守管理医療機器 | 非該当                |

### 関連商品

#### 携帯用酸素ボンベバッグ

#### 携帯用酸素ボンベ用 カートSP

[搭載イメージ]

[SPフローとSPセーブのセットイメージ]

**Aw エアウォーター・メディカル株式会社**  
 販売: エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7階  
 製造販売業者: 株式会社医器研 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-12-27  
 販売名: SPフロー 製造販売届出番号: 11B1X00004000001

- 改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。
- 本誌の記載内容は2019年1月現在のものです。