

酸素節約装置


SPセーバーII



地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

SPセーブ-Ⅱ は こんな問題を解決します

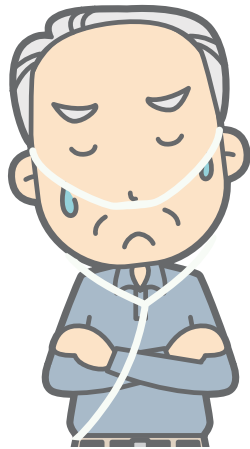

安静時と労作時で酸素処分量が
違うんだけど、実は設定流量を
変えたことがないんだよね



電池式は感度がいいんだけど、
アラームが鳴るといけないから
映画館に行けないわねえ

小型軽量-スマホなみ



見た目が小さいばかりでなく、薄い設計とな
っているため、ポケットにしまうことができ
ます。

もちろん大幅な軽量化もされているため、ポ
ケットに入れても違和感がありません。

電池を含めた重さは、スマホなみです。

手元操作・表示の有用性



すぐに
取り出せる！

今までの呼吸同調器は、ボンベバッグの中に
収められていて、アラームが鳴っていても患
者さま自身は気づいていないことがありまし
た。

ポケットやハンドバッグといった手近な場所
に収納することで操作性を格段に向上させて
います。

はじめりはマナーモードで

無呼吸警報は鼻呼吸を促すのに有用ですが、映画館や冠婚葬祭の席で不用意にアラーム音がするため、患者さまが使いたがらない傾向がありました。

段階的にアラームを発報するので、安心してご使用になれます。



超高感度・高節約率仕様




時間を気にしないで
お買い物できるよう
なったわ



患者さまの吸気を検知するセンサーが独自技術のもので、極めて感度が高い仕様になっています。

また、酸素節約率も最大5倍となっています。これまで呼吸同調器が使えなかった患者さまに、ぜひお試しください。


電池ながもち

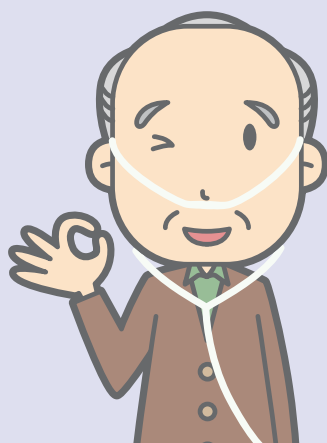

従来のタイプ（単3形電池4本使用）と比べ、単3形電池2本使用で長時間稼働します。

電池にかかる費用を大幅におさえ、患者さまの経済的負担を軽減します。

製品外観（実寸大）

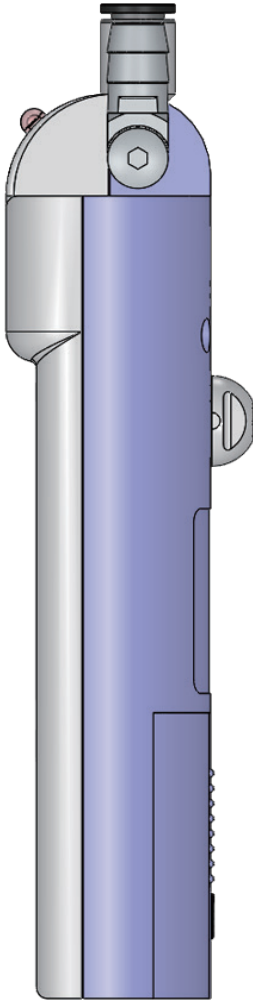


付属品



リング
ストラップ



カプラ
チューブ ※

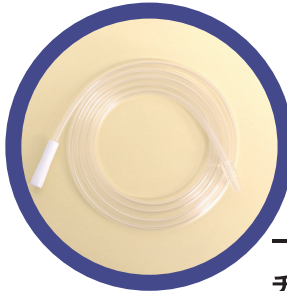

一般用
チューブ ※

※ 別売品として追加購入可

おもな製品仕様

品名	SPセーブ-Ⅱ（販売名：アイビー）
品番	CV01-SP（型式：CV01）
一般的名称	呼吸同調式レギュレータ
医療機器認証番号	227AFBZX00087000
クラス分類	Ⅱ 管理医療機器
JMDNコード	70576000
機器分類	内部電源機器 BF形機器
流量設定	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6L/分
入力圧力	110～210 (kPa) 5段階設定
電源	単3形乾電池×2本
JANコード	4573254330026

使用条件	（結露なきこと）
温度	-5～40℃
湿度	10～80%
気圧	800～1060hPa
保管/輸送条件	（結露なきこと）
温度	-10～50℃
湿度	5～95%
気圧	800～1060hPa
寸法	W67 x D27 x H120 mm（突起部除く）
重量	130g（電池除く）

◆取扱説明書をお読みの上、医師の処方及び指示に従ってお使い下さい。◆本カタログの内容は事前の予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

販売：エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

製造販売業者・製造業者：武蔵医研株式会社 〒333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号